

Manual de Proloquo4Text

Versión 4.0

www.assistiveware.com © 2019 Todos los derechos reservados.



Proloquo4Text™

Escribe. Habla. Comunícate.



1. Introducción	3	9. Opciones: Aspecto	15
Introducción		Cómo cambiar la disposición de los bloques rápidos	
Panel de texto		Cómo personalizar el aspecto de la predicción	
Idiomas múltiples			
Acceso al manual en la aplicación			
2. Asistente de inicio	5	10. Opciones: Idioma y habla	16
Configuración		Cómo seleccionar las voces	
Cómo configurar un usuario		Cómo gestionar los idiomas	
Cómo añadir más usuarios o voces		Control de la reproducción	
3. Interfaz	6	Pronunciación de los ítems de los bloques rápidos	
Elementos principales de la interfaz		11. Opciones: Predicción	17
Cómo alternar entre bloques rápidos		Palabras (predicción)	
Diferencias entre el iPad y el iPhone		Frases (predicción)	
Comunicación		Ampliación de abreviaturas	
Personalización		12. Opciones: Restricciones	18
4. Bloques rápidos	8	Restricciones a la edición y la compartición	
Tipos de bloques rápidos		Cómo configurar la compartición	
Frases		13. Opciones: Privacidad	19
Habla rápida		Uso privado	
Historial		Cómo borrar el historial y el registro de FRASES	
Conversaciones		14. Opciones: Copia de seguridad	20
Palabras (predicción)		La importancia de las copias de seguridad	
Frases (predicción)		Cómo hacer una copia de seguridad	
5. Modo de edición	10	Cómo exportar una copia de seguridad	
Funciones del modo de edición		Cómo importar una copia de seguridad	
Cómo editar ítems		Cómo restaurar a partir de una copia de seguridad	
Cómo trasladar ítems entre categorías		Instrucciones más detalladas	
Cómo ocultar ítems		Bloquear opciones	
Cómo cambiar propiedades		16. Opciones: Información, soporte y noticias	22
iPhone		Información y soporte	
6. Cómo usar un teclado externo	12	Ayuda contextual específica	
Cambios en la interfaz de usuario		Noticias	
Funciones rápidas de teclado			
7. Opciones	13		
Opciones del usuario			
Opciones generales			
8. Opciones:			
Cómo crear un nuevo usuario	14		
Varios usuarios			
Cómo crear usuarios			
Cómo cambiar de usuario			
Cómo eliminar usuarios			



1. Introducción


INTRODUCCIÓN

Proloquo4Text™ es una aplicación de comunicación aumentativa y alternativa (CAA) basada en texto destinada a personas que no pueden hablar o que tienen dificultades para hacerse entender. Diseñada para permitir una comunicación basada en texto rápida y flexible, Proloquo4Text admite el uso de usuarios multilingües.


PANEL DE TEXTO

El **panel de texto** (1) es el elemento central de Proloquo4Text. Con el teclado puedes escribir en el panel de texto cualquier cosa que quieras

decir. La **predicción de palabras** (2) y la **predicción de frases** (3) pueden ayudarte a comunicarte con menos esfuerzo. Un conjunto de **bloques rápidos** te permite acceder fácilmente a varias funciones adicionales. Utiliza el bloque **Historial** para volver a decir algo sin necesidad de teclearlo otra vez. Organiza las frases que utilices con más frecuencia en el bloque **Frases** (5) y accede a ellas de manera rápida. Usa el bloque **Habla rápida** (4) para insertar interjecciones rápidamente en la conversación. El bloque **Conversaciones** te permite alternar con fluidez entre diversas conversaciones. ►

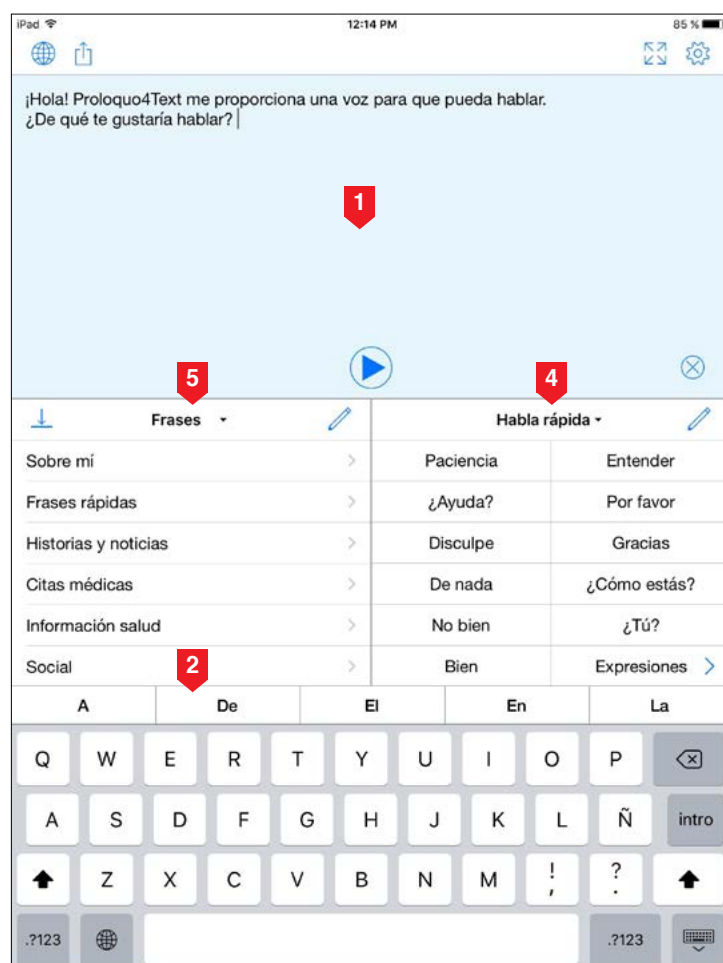

iPad

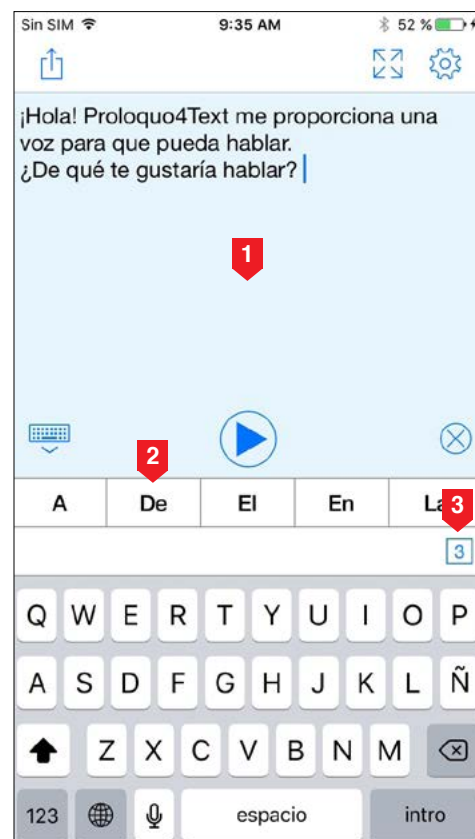

iPhone




IDIOMAS MÚLTIPLES

Si hablas varios idiomas y utilizas múltiples teclados en iOS, Proloquo4Text te permite modificar automáticamente el idioma de la predicción de palabras, las frases y otro contenido cuando cambias de teclado. Si prefieres usar un teclado de iOS para todos los idiomas que hablas, Proloquo4Text te permite configurar manualmente los idiomas en las opciones y mostrará un **botón para cambiar de idioma** (1) que te permitirá alternar entre varios idiomas.

Encontrarás más información sobre cómo utilizar y configurar Proloquo4Text en este manual.

ACCESO AL MANUAL EN LA APLICACIÓN

Desde dentro de la aplicación puedes acceder a este manual abriendo **Opciones** (2) y seleccionando a continuación **Soporte** primero y luego **Manual**.

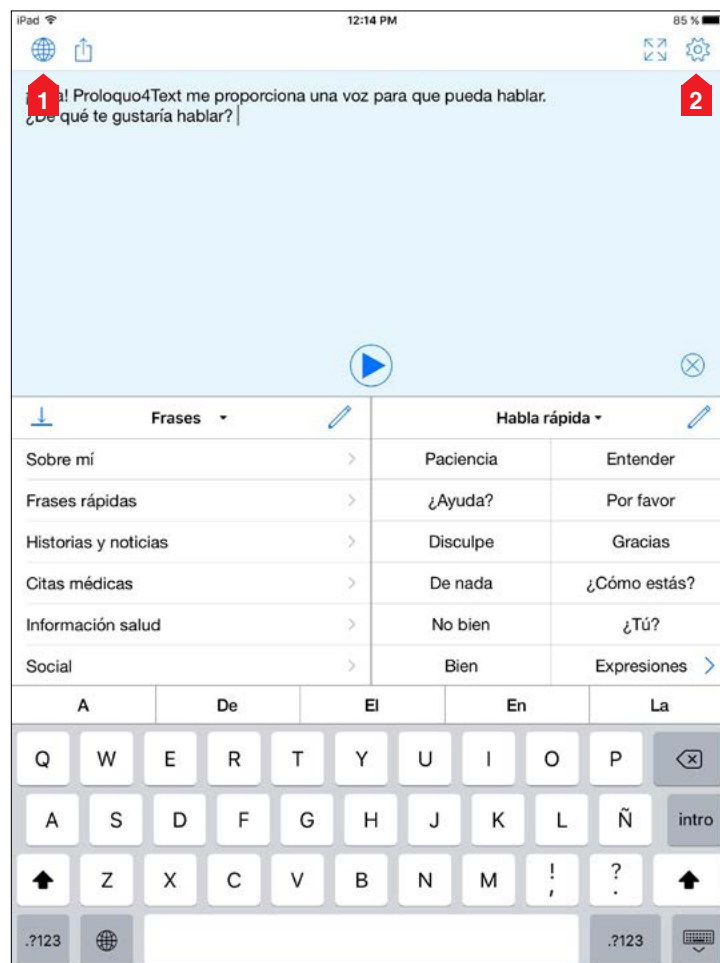



2. Asistente de inicio

CONFIGURACIÓN



La primera vez que abras Proloquo4Text, un asistente te guiará por el proceso de configuración inicial.

CÓMO CONFIGURAR UN USUARIO

Escribe el nombre del usuario (1) y pulsa el botón **Siguiente** (2). A continuación, selecciona una **voz** (3), que se descargará en cuanto cierres el asistente y pulses el botón **Siguiente** (4). Ten en cuenta que mientras se descarga la voz que has seleccionado se utilizará otra voz de una calidad inferior. De este modo, podrás empezar a comunicarte enseguida.

CÓMO AÑADIR MÁS USUARIOS O VOCES

Tras la configuración inicial, puedes ir a las opciones de Proloquo4Text para crear usuarios adicionales o añadir nuevos idiomas y voces, que podrás descargar de manera gratuita.

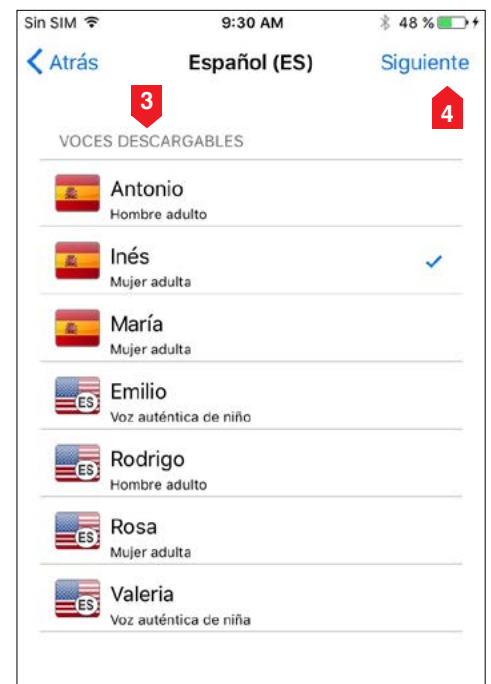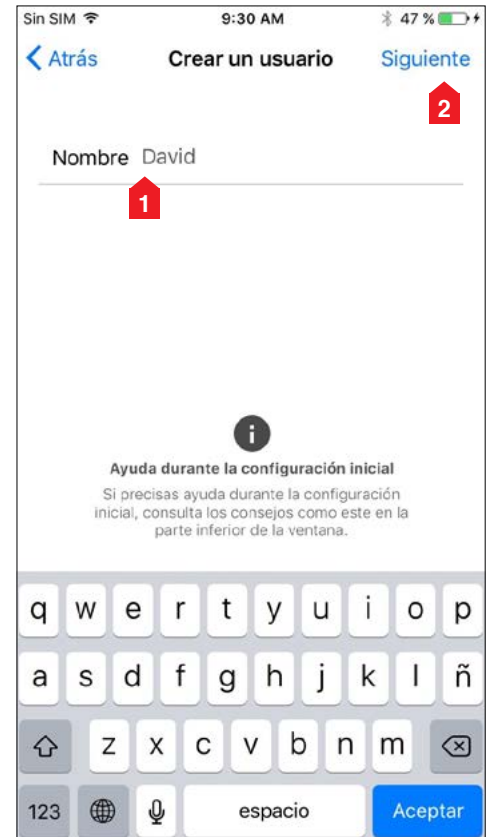



3. Interfaz

ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA INTERFAZ


Proloquo4Text está concebido para permitirte expresarte de manera fácil y eficaz. Pulsa en el **panel de texto** para empezar a escribir. Escribe con el teclado en pantalla, que incluye el avanzado sistema de **predicción de palabras** PolyPredix™ que aprende de lo que escribes, o utiliza un teclado Bluetooth.

Los **bloques rápidos** te permiten acceder fácilmente a categorías personalizables de **Frases** (las frases de uso más frecuente), **Habla rápida** (para interjecciones rápidas), **Conversaciones** (para alternar con facilidad entre conversaciones), **Frases (predicción)**, **Palabras (predicción)** e **Historial**.

En **Opciones** puedes configurar qué **bloques rápidos** quieres utilizar y dónde aparecerán, además de personalizar los colores, los tipos de letra y muchos otros aspectos.

CÓMO ALTERNAR ENTRE BLOQUES RÁPIDOS

Puedes alternar entre distintos **bloques rápidos** pulsando en el título del **bloque rápido** que quieras usar. Si lo mantienes pulsado, aparecerá una ventana emergente con una lista de **bloques rápidos**, que te permitirá activar directamente un **bloque rápido** concreto. Puedes ocultar o mostrar temporalmente un **bloque rápido** pulsando el botón de activación de la visibilidad.

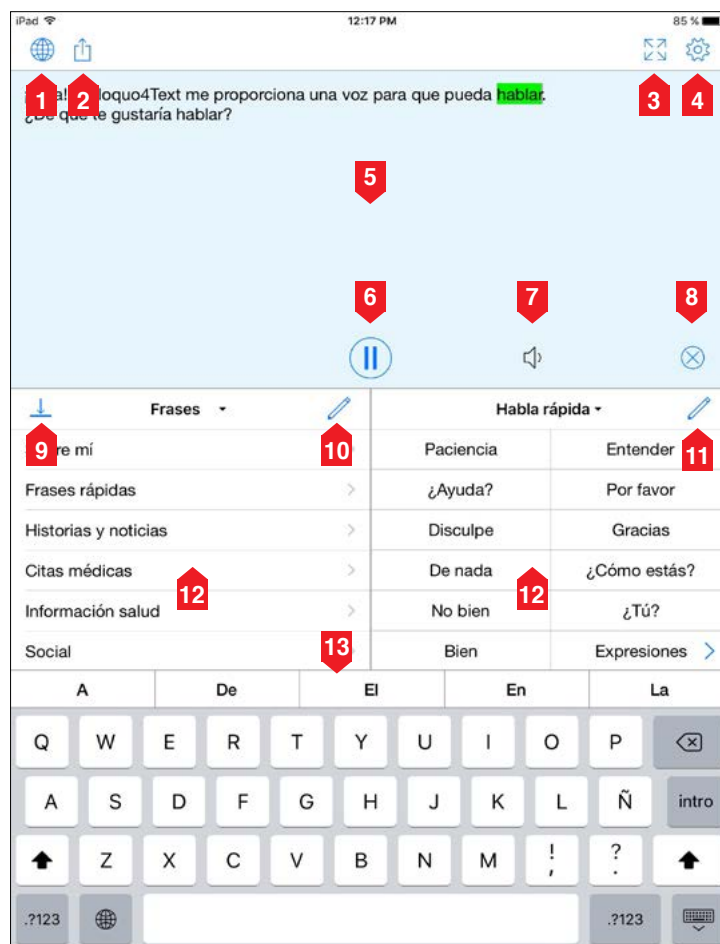

1. Botón para cambiar de idioma*
2. Compartir
3. Pantalla completa
4. Opciones
5. Panel de texto
6. Reproducción/pausa
7. Indicador de sonido
8. Borrar el panel de texto
9. Mostrar u ocultar los bloques rápidos
10. Añadir una conversación
11. Editar un bloque rápido
12. Bloques rápidos
13. Palabras (predicción)

*El botón para cambiar de idioma solo está disponible cuando "Gestionar idiomas" está ajustado a Manual. Consulta el capítulo 10 para obtener más información.



DIFERENCIAS ENTRE EL IPAD Y EL IPHONE

En el iPhone, necesitas ocultar el teclado mediante el botón **Abrir/cerrar teclado** (1), situado en la parte inferior del panel de texto, para acceder a los **bloques rápidos**. En el iPad, **Frases (predicción)** es un **bloque rápido**, mientras que en el iPhone tienes que pulsar el cuadradito (2), que muestra el número de frases coincidentes en la segunda fila de **Palabras (predicción)**, para poder acceder a la predicción de frases.



COMUNICACIÓN

Puedes configurar la aplicación para que pronuncie en voz alta el texto a medida que lo escribes o bien pulsar el botón **Reproducir** una vez hayas acabado de escribir (configura este comportamiento en **Opciones**). Utiliza el botón **Compartir** para compartir tu texto a través del correo electrónico, Mensajes, Twitter y el portapapeles.

Si prefieres comunicarte en silencio, puedes pulsar el botón **Pantalla completa** (3) para mostrar el contenido del panel de texto a toda pantalla. En el modo de pantalla completa, puedes utilizar el botón **Girar** (4) para que el texto resulte fácilmente legible para el interlocutor que tienes delante.

PERSONALIZACIÓN

Pulsa el botón **Editar** para editar el contenido de **Frases** y **Habla rápida**, o para borrar entradas específicas de la lista **Historial**.

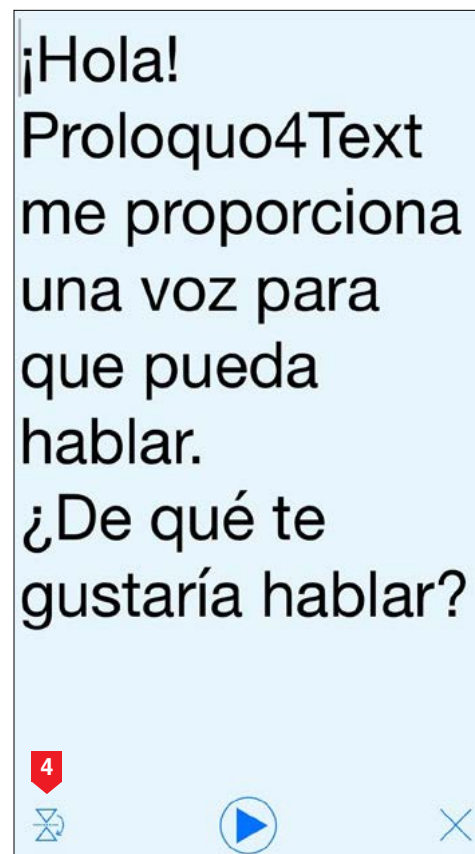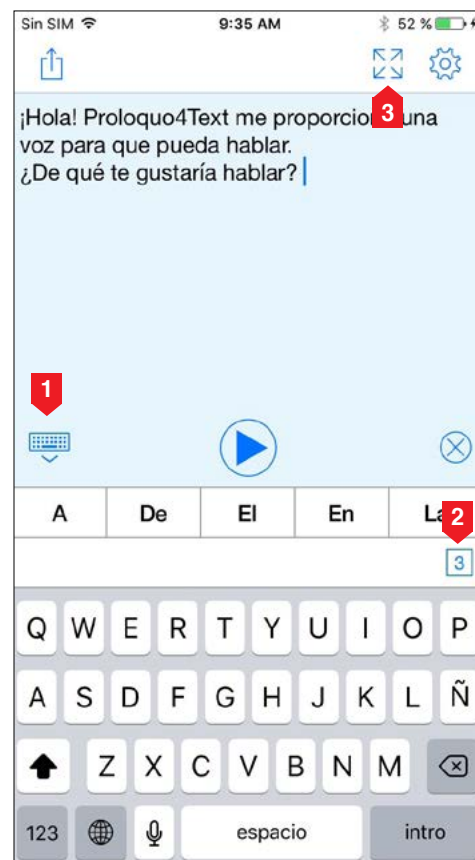



4. Bloques rápidos

TIPOS DE BLOQUES RÁPIDOS

Hay un total de seis **bloques rápidos** que te ayudarán a agilizar tus conversaciones: **Frases, Habla rápida, Conversaciones, Historial, Palabras (predicción) y Frases (predicción).**

Los dos últimos bloques rápidos no están disponibles como tales en el iPhone, sino que están integrados en la barra de predicción de palabras.

FRASES

Utiliza **Frases** para guardar frases, oraciones e incluso párrafos de uso habitual. Añade una frase nueva a la categoría actual seleccionando texto en el panel de texto y pulsando “Crear frase” en el menú de edición. Puedes hacer lo mismo pulsando el botón Editar de la barra de navegación para modificar las frases o para añadir o eliminar

entradas. Puedes organizar el contenido en categorías. También puedes asignar abreviaturas a cada ítem, de tal forma que baste con escribir la abreviatura para insertar el ítem completo en el panel de texto. Por omisión, al pulsar una frase se insertará el texto en el panel de texto, mientras que si la tocas y la mantienes pulsada se leerá en voz alta de inmediato. Puedes ajustar este comportamiento en la sección **Pronunciar los ítems** de las opciones **Idioma y habla**.

HABLA RÁPIDA

Utiliza **Habla rápida** para las frases y expresiones más habituales a las que desees acceder rápidamente durante la comunicación. Por omisión, al pulsar una única vez un ítem de **Habla rápida**, este se pronuncia al instante y no se inserta texto en el panel de texto, lo que permite realizar fácilmente un comentario rápido ►

↓	Frases ▾	✎
	Sobre mí >	
	Frases rápidas >	
	Historias y noticias >	
	Citas médicas >	
	Información salud >	
	Social >	

Habla rápida ▾		✎
Paciencia	Entender	
¿Ayuda?	Por favor	
Disculpe	Gracias	
De nada	¿Cómo estás?	
No bien	¿Tú?	
Bien	Expresiones >	

↓	Conversaciones ▾	+
	¡Hola! Proloquo4Text me proporcio...	

Historial ▾	✎
Últimos 15 minutos	
¡Hola! Proloquo4Text me proporciona un...	

Palabras (predicción) ▾
Llama
Llamaba
Llamada
Llamado
Llamar
Llamó

↓	Frases (predicción) ▾
	A Saboya 25, a la altura de los cines. Gr...
	Bien, gracias.
	De nada.
	Debería terminar a las
	Disculpe.
	El número de mi médico de cabecera es



sin que se refleje en el texto que estás escribiendo en el panel de texto. Por omisión, al mantener pulsado el ítem se insertará el texto en el panel de texto. Puedes ajustar este comportamiento en la sección **Pronunciar los ítems** de las opciones **Idioma y habla**.

HISTORIAL

Utiliza el **Historial** para volver a decir algo que ya has dicho con anterioridad. Al pulsar un texto, se insertará en el panel de texto, mientras que si lo mantienes pulsado se leerá en voz alta de inmediato. Puedes modificar este comportamiento en la sección **Pronunciar los ítems** de las opciones **Idioma y habla**. Ten en cuenta que se añade texto al historial cada vez que pulsas el botón Reproducir. Si deslizas el Historial hacia abajo, aparecerá un campo de búsqueda que te permitirá buscar texto específico.

CONVERSACIONES

Utiliza **Conversaciones** para alternar fácilmente entre dos o más conversaciones. Esto te facilita, por ejemplo, responder a una pregunta en una segunda conversación sin interrumpir lo que estabas escribiendo en la primera.

PALABRAS (PREDICCIÓN)

Utiliza la **predicción de palabras** para escribir más rápidamente. El sistema de predicción de palabras aprende de manera automática palabras y combinaciones de palabras nuevas. Ojo: eso implica que también incorpora las erratas, pero si no cometes el mismo error de escritura una y otra vez, el sistema predictivo eliminará de manera automática la errata al cabo de un tiempo. En la sección **Predicción** de las

opciones, puedes configurar el sistema de predicción de palabras e incluso restringir el aprendizaje a las palabras escritas correctamente.

FRASES (PREDICCIÓN)

Utiliza la **predicción de frases** para acceder rápidamente a las oraciones de uso más frecuente que comienzan con el texto que has escrito. **Predicción (frases)** incluye las oraciones tecleadas recientemente, así como tus frases.



5. Modo de edición

FUNCIONES DEL MODO DE EDICIÓN

Para editar ítems en Frases o “Habla rápida”, pulsa el botón **Editar** para activar el modo de edición. En el modo de edición puedes **Añadir** nuevas categorías e ítems, **Cortar**, **Copiar** y **Pegar** contenido, **Eliminar** contenido y editar contenido existente. Para salir del modo de edición debes pulsar **OK** en la esquina superior derecha de la pantalla. Si no ves ese botón **OK**, significa que estás en el modo de selección y primero debes pulsar **OK** en la esquina inferior izquierda de la pantalla o, si utilizas un iPhone, primero debes pulsar el botón Atrás para retroceder a la lista de ítems. Puedes crear ítems de manera rápida copiando una lista de oraciones (una


por línea) desde otra aplicación y luego pulsando **Añadir** en el modo de edición.

CÓMO EDITAR ÍTEMS

Para editar un único ítem, selecciónalo. Para editar varios ítems a la vez, pulsa **Seleccionar** y luego pulsa los ítems que deseas editar. Para reordenar ítems, primero debes pulsar **Seleccionar**, a continuación pulsar las tres líneas que aparecen junto al ítem que deseas trasladar y, por último, arrastrarlo a la nueva ubicación.

CÓMO TRASLADAR ÍTEMS ENTRE CATEGORÍAS

Para trasladar ítems de una categoría a otra, pulsa **Seleccionar** y luego

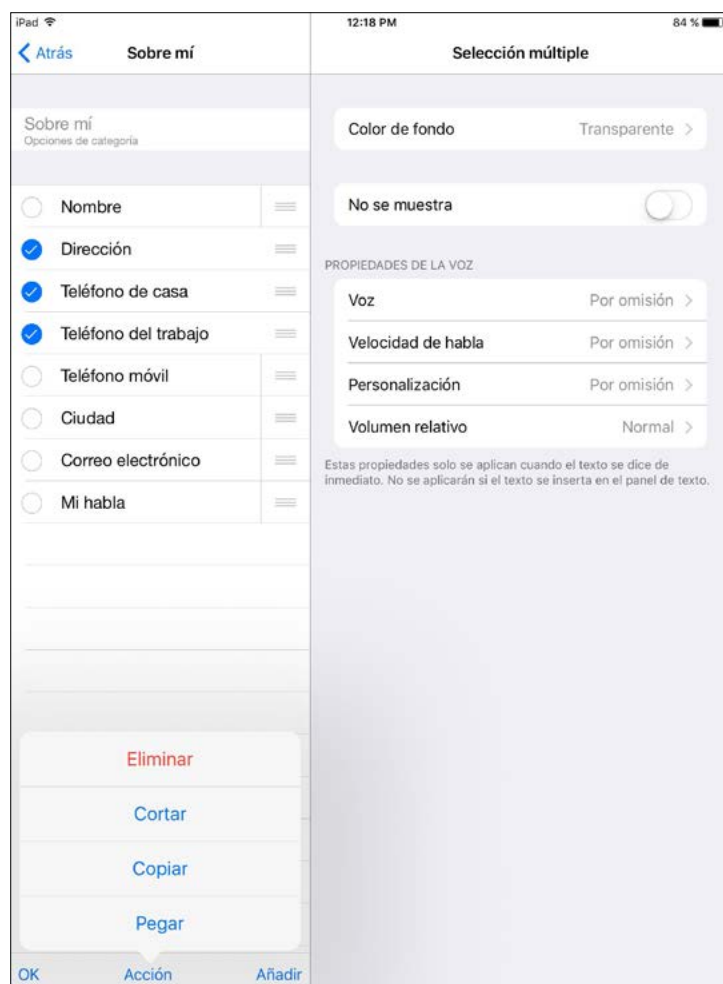



selecciona los ítems que quieres trasladar. Pulsa **Acción** y selecciona **Cortar**.

A continuación, desplázate hasta la nueva categoría, pulsa **Acción** y selecciona **Pegar**.

CÓMO OCULTAR ÍTEMS

Activa la opción **No se muestra** para las categorías o los ítems que no desees que estén visibles durante el uso habitual de la aplicación. Aun así, los ítems ocultos podrán seguir utilizándose para la ampliación de abreviaturas.


CÓMO CAMBIAR PROPIEDADES

También puedes cambiar el aspecto y las propiedades de la voz de un ítem. Ten en cuenta que las propiedades de la

voz solo se aplicarán al texto pronunciado inmediatamente, no al insertado en el panel de texto.

IPHONE

En el iPhone puedes acceder a las mismas funciones de edición que en el iPad. La principal diferencia es que no podrás ver los ítems o las categorías en la misma pantalla que las propiedades.

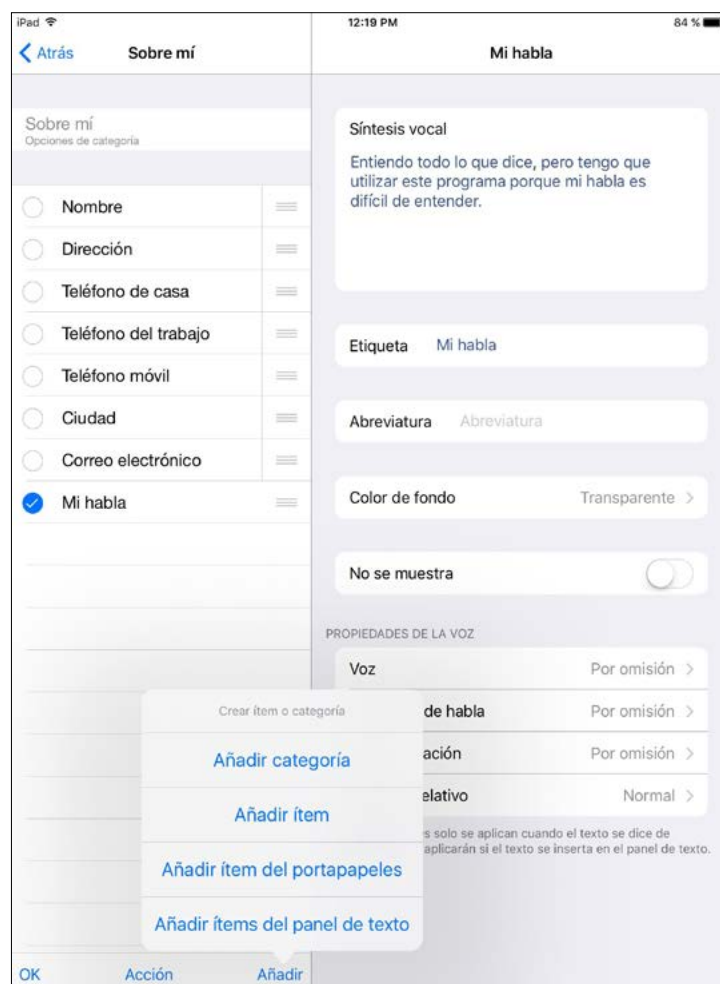



6. Cómo usar un teclado externo


CAMBIOS EN LA INTERFAZ DE USUARIO

Al conectar un teclado externo o un teclado Bluetooth, el teclado en pantalla desaparecerá. No obstante, a menos que desactives la predicción de palabras, la barra de predicción de palabras continuará estando disponible. En la parte inferior derecha de cada sugerencia de predicción aparecerá un número que te indica qué tecla numérica del teclado debes pulsar para seleccionarla. Para alternar entre escribir los números y utilizar las teclas numéricas para seleccionar sugerencias, puedes pulsar en el botón de **activación/desactivación de números** (1) situado en el lado derecho de la barra de predicción.

de palabras y teclear números. Asimismo, están disponibles todas las funciones rápidas de teclado externo estándares de iOS.

FUNCIONES RÁPIDAS DE TECLADO

Puedes utilizar las teclas Comando+Intro para reproducir o hacer una pausa en el habla; Comando+K para borrar el panel de texto, y Comando+0 para alternar entre seleccionar sugerencias de la predicción

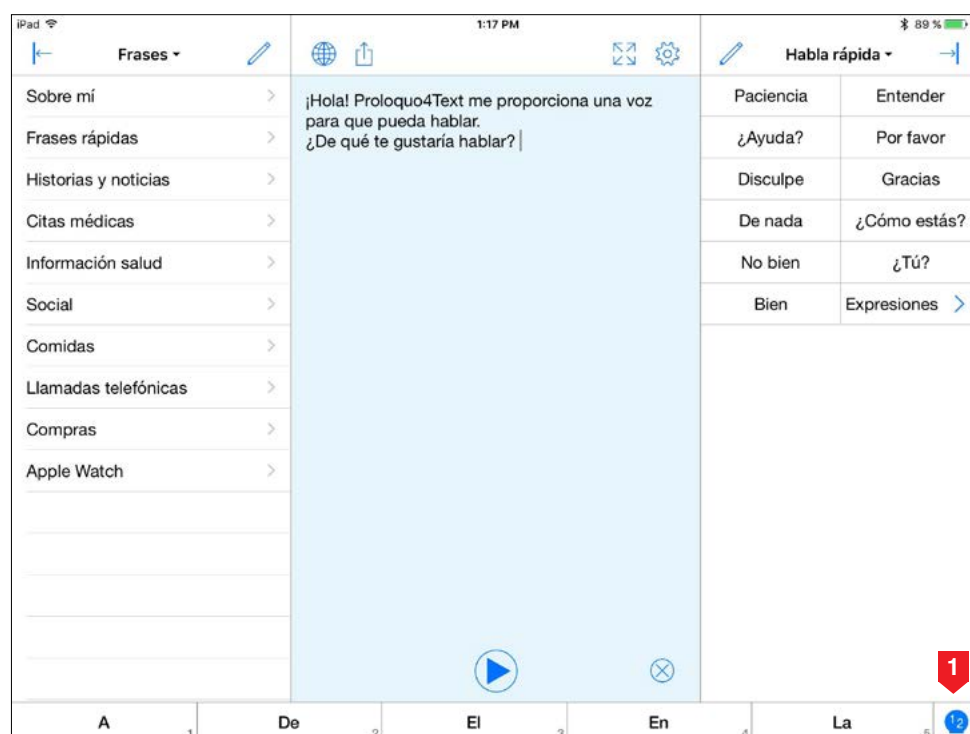



7. Opciones

OPCIONES DEL USUARIO

Para acceder a las **Opciones** debes pulsar el icono de la rueda de engranaje. En **Opciones** puedes crear más **usuarios**, configurar el **aspecto** de Proloquo4Text, configurar los **idiomas y el habla** y ajustar la **predicción**. Con las **restricciones** puedes restringir el acceso a determinadas funciones; además, hay una sección para controlar la **privacidad**.

OPCIONES GENERALES

También existen algunas opciones generales que se aplican a todos los usuarios, como **Copias de seguridad**, **Bloquear opciones** (configuración de una contraseña para que un alumno o niño no modifique las opciones), **Información** (más detalles sobre Proloquo4Text), **Soporte** (acceso al manual interno de la aplicación y a recursos educativos, y contacto con el servicio de soporte) y **Noticias** (las últimas novedades de AssistiveWare).





8. Opciones: Cómo crear un nuevo usuario

VARIOS USUARIOS

En la sección **Usuarios** de las opciones, puedes crear varias configuraciones de usuario.

Cada usuario puede tener sus propios ajustes para controlar la voz que utiliza, las opciones de aspecto, etc. Esto resulta muy útil tanto en el entorno de un aula, donde varios alumnos comparten un mismo dispositivo, como también en el contexto de un terapeuta que utilice Proloquo4Text con pacientes con necesidades muy diversas.

CÓMO CREAR USUARIOS


Pulsa **Nuevo usuario** (1) para crear un usuario de cero con los valores por omisión, o bien pulsa **Duplicar usuario existente** (2) para crear un usuario basado en los valores de otro ya existente.

CÓMO CAMBIAR DE USUARIO

Para cambiar de usuario, solo tienes que pulsar el nombre del usuario al que quieras cambiar.

CÓMO ELIMINAR USUARIOS

Para eliminar usuarios, pulsa el botón **Editar** (3) y elimina los usuarios que ya no necesitas. Ten en cuenta que no puedes borrar el usuario activo.

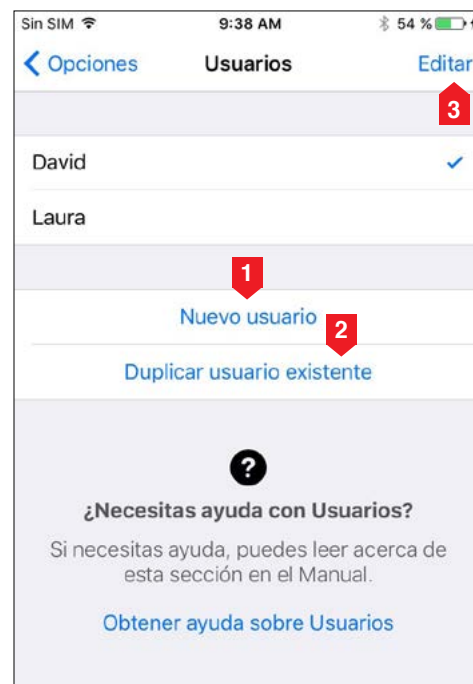



9. Opciones: Aspecto

CÓMO CAMBIAR LA DISPOSICIÓN DE LOS BLOQUES RÁPIDOS

En la sección **Aspecto** de las opciones, puedes configurar el tamaño de los iconos, el aspecto del **panel de texto** y los **bloques rápidos**. Para cada bloque rápido, puedes elegir entre las opciones **Visible** o **No se muestra**, y en el iPad puedes determinar si aparece a la izquierda o a la derecha de la pantalla. Puedes ajustarlos todos para que aparezcan en el mismo lado, de forma que dispongas de un panel de texto más grande, o incluso ocultarlos todos y utilizar un panel de texto a pantalla completa.

CÓMO PERSONALIZAR EL ASPECTO DE LA PREDICCIÓN

Puedes mostrar u ocultar la barra de **predicción de teclado** y personalizar el **tipo de letra**.

< Opciones		Aspecto
Iconos grandes <input type="checkbox"/>		
PANEL DE TEXTO		
Tipo de letra	HelveticaNeue, 18 pt.	>
Pantalla completa	52 pt.	>
Color de fondo	Azul cielo	>
Controles	Abajo	>
Indicador de habla	Visible al hablar	>
Resaltado del texto Palabra >		
Color de resaltado	Verde	>
BLOQUES RÁPIDOS		
Frases	Sí	>
Habla rápida	Sí	>
Conversaciones	Sí	>
Historial	Sí	>
Palabras (predicción)	Sí	>
Frases (predicción)	Sí	>
Tipo de letra HelveticaNeue, 18 pt. >		
Color de fondo	Blanco	>
PREDICCIÓN DE TECLADO		
Palabras (predicción)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tipo de letra	HelveticaNeue-Medium...	>
Estas opciones solo se aplican a David.		



10. Opciones: Idioma y habla

CÓMO SELECCIONAR LAS VOCES

En **Idioma y habla** de las opciones, puedes elegir la voz o las voces que se van a usar para cada **idioma activo**.

CÓMO GESTIONAR LOS IDIOMAS


En **Gestionar idiomas**, selecciona la opción **Automático** si deseas que los idiomas disponibles se determinen en función de los teclados de iOS que tengas activos (según lo que tengas seleccionado en la aplicación Ajustes de tu dispositivo). Ajusta la gestión de idiomas a **Manual** si prefieres utilizar un único teclado para todos los idiomas y quieres seleccionar los idiomas que admitirá Proloquo4Text de entre aquellos para los que la aplicación tiene voces disponibles.

CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN

Con respecto al panel de texto, puedes controlar cómo se reproduce el texto mientras escribes y cuando se pulsa el botón de reproducción. Activa **Detectar idioma** si hay varios idiomas activos y deseas que Proloquo4Text deduzca el idioma y la voz asociada que debe usar para reproducir un texto formado por oraciones en diferentes idiomas.

PRONUNCIACIÓN DE LOS ÍTEMS DE LOS BLOQUES RÁPIDOS

Por último, respecto a los **bloques rápidos**, puedes determinar si los ítems deben pronunciarse en lugar de insertarse en el panel de texto al **pulsarlos** o al **mantenerlos pulsados**.

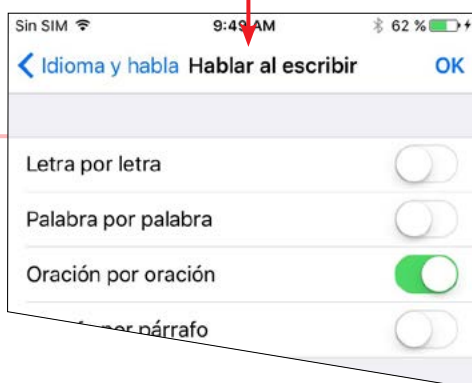



11. Opciones: Predicción

PALABRAS (PREDICCIÓN)

Desactiva el **espaciado automático** si no deseas que se añada un espacio automáticamente después de seleccionar una sugerencia. Desactiva la predicción de **varias palabras** si quieres que cada sugerencia conste de una sola palabra y nunca de varias (como, por ejemplo, “por favor”).

En **Aprendizaje**, selecciona **Palabras escritas correctamente** si no deseas que Proloquo4Text recuerde ninguna palabra que no se encuentre en el diccionario integrado de Apple, o bien desactiva por completo la opción Aprendizaje. Por supuesto, la predicción de palabras funcionará mucho mejor si permites que Proloquo4Text recuerde **todas las palabras**, pero para las personas que no dominan bien la ortografía puede resultar útil permitirle memorizar solo las palabras escritas correctamente. No es posible eliminar manualmente las palabras mal escritas. Aun así, las palabras memorizadas que no se utilicen de manera repetida se eliminarán automáticamente transcurrido un tiempo.

Con las otras opciones de predicción puedes determinar cuántas sugerencias se presentarán y cómo aparecerán ordenadas.

FRASES (PREDICCIÓN)

Define el número máximo de sugerencias y el orden en el que se muestran.

AMPLIACIÓN DE ABREVIATURAS

Pulsa en **Ampliar** para establecer cómo activar la “Ampliación de abreviaturas”.





12. Opciones: Restricciones

RESTRICCIONES A LA EDICIÓN Y LA COMPARTICIÓN

En la página de restricciones, puedes desactivar la posibilidad de **permitir editar** los ítems de **Frases y Habla rápida** o de **permitir compartir** el texto del panel de texto por correo electrónico, Mensajes y Twitter.

Si no quieres que el usuario anule alguna de estas restricciones, deberás utilizar la función “Bloquear opciones” (explicada en el capítulo 15) para proteger las opciones mediante contraseña.

CÓMO CONFIGURAR LA COMPARTICIÓN

Ten en cuenta que para usar el correo electrónico, Mensajes y Twitter deberás configurar cuentas para estos servicios en los ajustes del dispositivo.






13. Opciones: Privacidad

USO PRIVADO

Activa **Uso privado** para mantener una conversación totalmente privada durante la cual Proloquo4Text no guardará ninguna de las palabras u oraciones escritas. De este modo, se reduce significativamente la eficacia de la predicción, pero te garantiza que, si después otra persona accede a la aplicación, no pueda ver lo que se dijo.

CÓMO BORRAR EL HISTORIAL Y EL REGISTRO DE FRASES

Utiliza las opciones **Borrar historial** y **Borrar registro de frases** para eliminar toda la información guardada anteriormente. Si borras el registro de frases, la predicción se verá muy afectada, pero no si borras el historial.

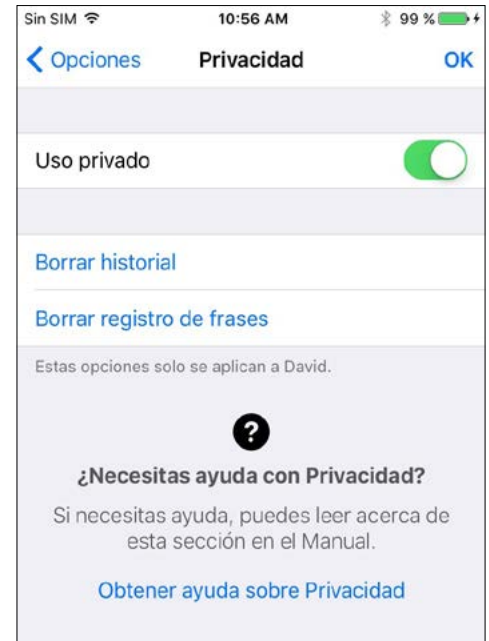



14. Opciones: Copia de seguridad

LA IMPORTANCIA DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD

Es importante realizar copias de seguridad de manera regular y guardarlas fuera del dispositivo. Puedes transferir las copias de seguridad al ordenador mediante “Compartir archivos” de iTunes, AirDrop o hacer uso de la integración con Dropbox o Google Drive. Puedes transferir las copias de seguridad de tu ordenador, Dropbox o Google Drive a otro dispositivo o enviarlas por correo electrónico o AirDrop a otra persona.

CÓMO HACER UNA COPIA DE SEGURIDAD

Pulsa **Copiar [nombre de usuario] ahora** para realizar una copia de seguridad de los datos del usuario actual, o bien pulsa **Copiar todos los usuarios ahora** para hacer una copia de seguridad de todos los usuarios de Proloquo4Text. De este modo, se crearán copias de seguridad internas. Para asegurarte de no perder tus valores personalizados, conviene que exportes regularmente tus copias de seguridad a iTunes o Dropbox o Google Drive.

CÓMO EXPORTAR UNA COPIA DE SEGURIDAD

Pulsa **Exportar copias de seguridad** para exportar una copia de seguridad a iTunes, Dropbox, Google Drive o AirDrop.

CÓMO IMPORTAR UNA COPIA DE SEGURIDAD

Para importar una copia de seguridad de iTunes, pulsa **Importar copias de seguridad**. Para importar una copia de seguridad desde Dropbox o Google Drive, abre el documento de copia de seguridad .p4tbk en la aplicación Dropbox o Google Drive.



CÓMO RESTAURAR A PARTIR DE UNA COPIA DE SEGURIDAD

Para restaurar la aplicación a partir de una copia de seguridad existente, utiliza **Restaurar a partir de copia**.

INSTRUCCIONES MÁS DETALLADAS


Para obtener más información, consulta: www.assistiveware.com/es/producto/proloquo4text/recursos



15. Opciones: Bloquear opciones

BLOQUEAR OPCIONES

Activa la opción **Bloquear** para restringir el acceso a las **opciones** mediante una contraseña y evitar así que un usuario efectúe modificaciones sin querer. Cuando el **bloqueo** está activado, es necesario introducir la contraseña correcta para poder acceder a las **opciones** de Proloquo4Text. Si no recuerdas la contraseña, ponte en contacto con proloquo4text@assistiveware.com para obtener ayuda.

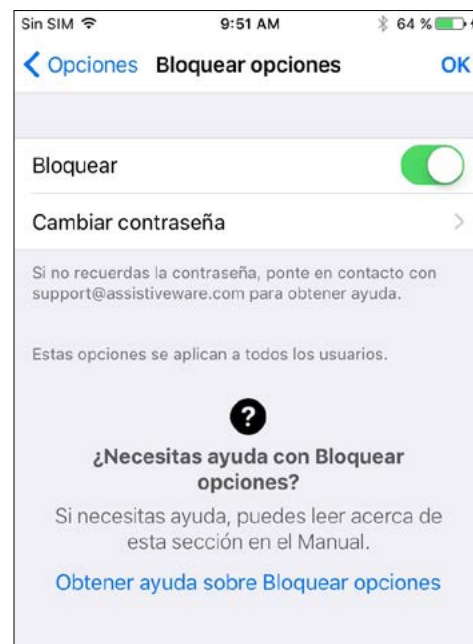



16. Opciones: Información, soporte y noticias

INFORMACIÓN Y SOPORTE

Para obtener más información sobre Proloquo4Text, accede a las opciones **Información** y **Soporte**. En **Información** puedes ver la versión de la aplicación que tienes instalada. En **Soporte** encontrarás enlaces a recursos de soporte y de la comunidad de nuestro sitio web. También puedes acceder a este manual desde la sección **Soporte**.

AYUDA CONTEXTUAL ESPECÍFICA

En la mayoría de las páginas de **opciones** aparece un enlace en la parte inferior de la pantalla que te proporcionará más información acerca de cada opción concreta.

NOTICIAS

En la sección **Noticias** puedes consultar las últimas noticias acerca de Proloquo4Text y temas relacionados.



Manual de Proloquo4Text

Versión 4.0

CONTACTO DE PROLOQUO4TEXT

support@assistiveware.com

RECURSOS DE PROLOQUO4TEXT

www.assistiveware.com/es/producto/proloquo4text/recursos

VÍDEOS DE PROLOQUO4TEXT

www.assistiveware.com/e-learning-videos

Proloquo4Text es una marca registrada de AssistiveWare B.V. AssistiveWare es un nombre comercial y una marca registrada de AssistiveWare B.V. en EE. UU. y otros países. © 2019 del manual y la aplicación Proloquo4Text: AssistiveWare®. Todos los derechos reservados.

AssistiveWare
Laurierstraat 193
1016 PL Ámsterdam
Países Bajos
fax: +31-20-6128266
www.assistiveware.com